

CASCO CON OBLÒ
PER TERAPIA CPAP
COLLARE IN POLIURETANO



HAROL

Il Vostro respiro

la nostra missione

ONE-HAR

Il casco **ONE - HAR** è concepito per la ventilazione non invasiva CPAP in ambiente ospedaliero. L'utilizzo del casco permette di effettuare la terapia in pressione positiva con flussi più elevati e periodi prolungati rispetto alle maschere facciali.

È RACCOMANDATO PER:

Edema polmonare cardiogeno - Insufficienza Respiratoria Acuta (IRA) - Edema polmonare non cardiogeno (A.L.I. - ARDS)
- Trauma toracico - Atelectasia - Ipossiemia post-operatoria - Asma.

» CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Manometro integrato** per misurare la pressione interna al casco.
- **Bretelle di ancoraggio imbottite** (a Ph neutro) e dotate di dispositivo di aggancio/sgancio rapido. **Cinghie di fissaggio** del casco al letto del paziente (opzionali).
- Una **tasca sull'ingresso del flusso** indirizza il flusso tangenzialmente alla tenda per ridurre il rumore e per evitare l'arrivo diretto sul volto del paziente.
- La **valvola antisoffocamento bidirezionale** è integrata nell'oblò e si apre automaticamente quando la pressione all'interno del casco scende al di sotto di 2 cmH₂O.
- La **tenda trasparente** è in PVC.
- Il dispositivo è LATEX FREE e DEHP FREE.
- Volume della tenda: 15 litri - Peso: 320 gr.
- Conessioni 22F/22M conformi alla norma ISO.

» VANTAGGI

FACILE UTILIZZO: il casco in un unico pezzo risulta pratico e facile da mettere o togliere.

RAPIDO ACCESSO AL PAZIENTE: grazie all'oblò a tenuta con apertura a vite che consente di eseguire operazioni di routine durante la terapia CPAP senza necessità di rimuovere l'intero casco.

CONFORTEVOLE: Il casco è privo di anello rigido per garantire il massimo comfort del paziente.

EFFICACIA: La perfetta tenuta è garantita da un collare in poliuretano morbido, tagliato a misura, che aderisce alla parte superiore delle spalle del paziente.


Utilizzare il casco con dispositivi e apparecchiature idonee alla ventilazione CPAP a flusso continuo (valore minimo di flusso 40 l/min.)

IL DISPOSITIVO È MONOUSO NON STERILE

Tenda totalmente trasparente

Valvola (integrata) antisoffocamento bidirezionale

Presca per rilevazione della pressione

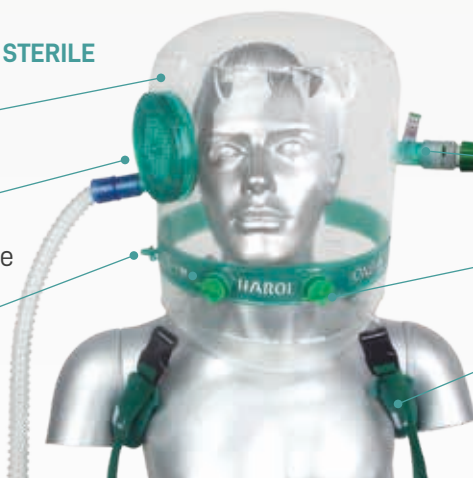

Manometro integrato

Accessi a tenuta per sondini

Bretelle imbottite con sgancio rapido

IL CASCO È DISPONIBILE IN VARIE TAGLIE A SECONDA DELLA CIRCONFERENZA DEL COLLO DEL PAZIENTE.

SPECIFICHE

CODICE	TAGLIA	CIRCONFERENZA DEL COLLO	UNITÀ DI VENDITA
CPAP10501/XS	EXTRA SMALL	30-32 cm	singola
CPAP10501/S	SMALL	35-37 cm	singola
CPAP10501/M	MEDIUM	37-40 cm	singola
CPAP10501/L	LARGE	40-43 cm	singola
CPAP10501/XL	EXTRA LARGE	43-45 cm	singola
CPAP10501/XXL	2X LARGE	45-50 cm	singola
CPAP10501/3XL	3X LARGE	>= 50 cm	singola

MADE IN ITALY

HAROL

Via Marcora 53, 20097
 San Donato Milanese (MI)
 +39 02 5272788

info@harol.it
 www.harol.it

